

Nouvelle
FT

REDACTION ET TRANSMISSION DU BILAN DEMATERIALISE

Indications

Toute victime prise en charge.



Justifications

Disposer d'aide à la prise en charge des victimes, limiter la ressaisie d'informations et partager le bilan à plusieurs partenaires (SAMU, urgences...)

Nombre de SP : 1


Matériels

- Tablette numérique avec coque de protection

Mise en œuvre

A

Connexion

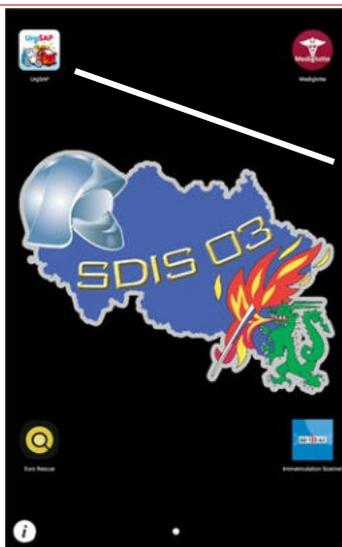

- Appuyer sur le pictogramme correspondant au progiciel UrgSAP.



B Identification




- Renseigner ses identifiants :


Identifiant : MATRICULE

Mot de passe : CODE CARBURANT

C Création et choix d'une intervention

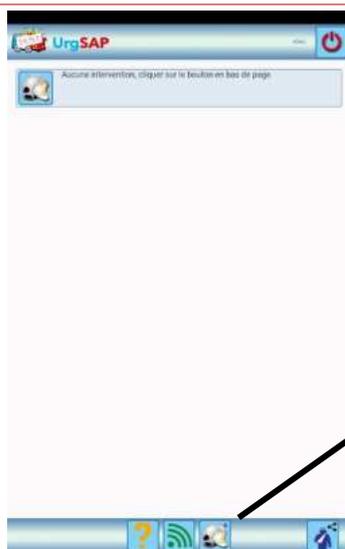

- Pour créer une intervention, appuyer sur le pictogramme présent sur le bandeau bas.

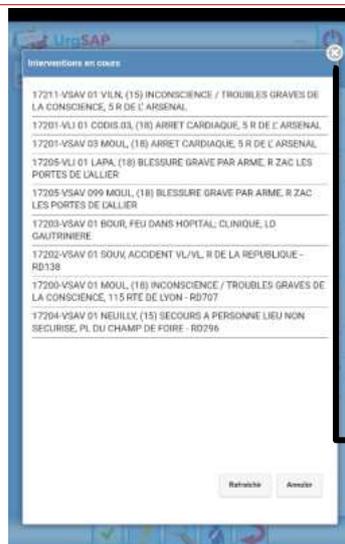

- Sélectionner l'intervention qui vous concerne dans la liste automatique des interventions en cours (n° d'intervention et engin).

La mise à jour des interventions se réalise au maximum toutes les 5 minutes. Vous pouvez utiliser le bouton « rafraîchir » si l'intervention n'est pas présente dans la liste.

Si votre intervention n'apparaît pas dans la liste ou si panne de serveur, vous pouvez tout de même créer une intervention en appuyant sur le pictogramme en haut à droite.




Il suffira ensuite de renseigner votre vecteur, la commune d'intervention et le N° d'intervention.



- Une fois l'intervention sélectionnée, les données de l'intervention viennent s'incrémenter automatiquement.


En cas d'erreur dans le choix de l'intervention, appuyer sur le pictogramme à gauche du N° d'intervention pour revenir au choix de l'intervention.

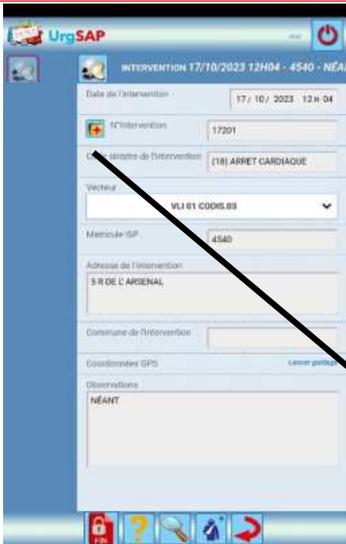

D Création d'une fiche victime

- Appui sur le pictogramme situé sur le bandeau bas.

L'outil permet de gérer plusieurs victimes sur la même tablette. L'appui sur ce pictogramme sera à reproduire pour la création de fiche supplémentaire. (1 fiche par victime en attendant l'arrivée des renforts).

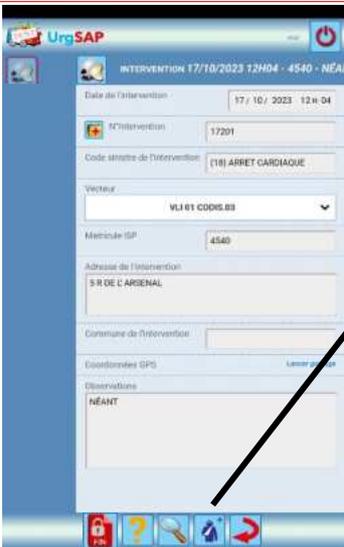

- Saisir toutes les données administratives de la victime, dans la mesure du possible et de l'état de la victime.

Si la commune de domiciliation de la victime n'est pas dans l'Allier, il faut saisir la valeur « Autre » dans la liste déroulante. Un champ libre « Précisez » apparaît.





E Saisie du bilan circonstanciel et du MARCCH



- Saisir l'ensemble des champs visibles dans les différents onglets en fonction de la situation rencontrée.

Chaque champ présenté doit être renseigné. Cela évitera Au Médecin Régulateur d'avoir le doute sur la recherche d'une donnée particulière. A défaut d'information, renseigner par « Néant ».

F Saisie de l'examen complémentaire par l'ISP



- Saisir l'ensemble des champs visibles au cours du remplissage via le pictogramme suivant.



Pictogramme disponible uniquement sur les fiches bilans ISP.

G Connectivité entre le Touch 7 et la tablette



- Une fois l'identité de la victime renseignée, appuyer sur le pictogramme suivant dans l'onglet reprenant les données administratives de la victime.






- Choisir l'appareil dans la liste proposée puis « OK ».

Cf numéro identification (étiquette) sur la façade avant de l'appareil.

Extraction des paramètres vitaux

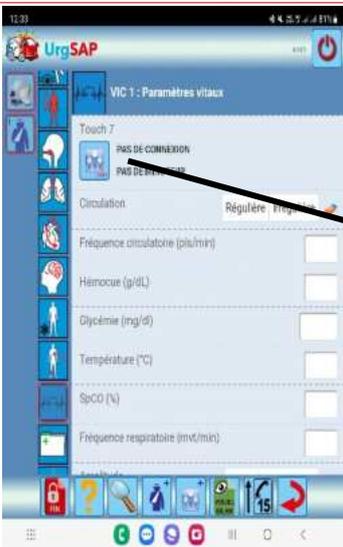


- Après la prise des paramètres vitaux avec le Touch 7, appuyer sur le pictogramme correspondant aux données souhaitées.



Pensez à transmettre les données relatives à l'identité de la victime avant l'extraction (cf première étape du paragraphe G).

Extraction des données DSA

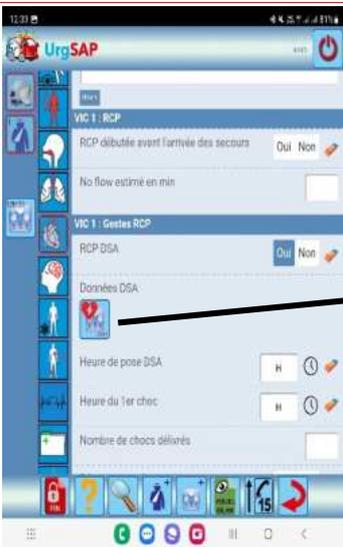

- Après la réanimation cardiopulmonaire associée avec le Touch 7, appuyer sur le pictogramme correspondant aux données souhaitées.



Pensez à transmettre les données relatives à l'identité de la victime avant l'extraction (cf première étape du paragraphe G).



Extraction des données de l'ECG (bilan ISP uniquement)

Pensez à transmettre les données de la victime avant l'extraction (cf première étape du paragraphe G).

- Se rendre dans l'onglet « Examen paramédical » via ce pictogramme. 
- Saisir la réponse « Oui » dans le champ « ECG ». 
- Choisir le type d'ECG réalisé via la liste déroulante. 
- Appuyer sur le pictogramme « ECG ». 

Si besoin de faire un autre ECG, appuyer sur le puis recommencer la procédure à partir du choix du type d'ECG.

K Envoi du bilan au SAMU

- Appuyer sur ce pictogramme. 

Il est possible de visualiser la synthèse avec le pictogramme 

Une fois le bilan transmis et après contact verbal avec le SAMU, celui-ci confirmera le devenir de la victime (destination, laissé sur place,...) par une fenêtre pop-up qu'il faudra acquitter.

Notification UrgSAP

Demandeur : TESTSAMU TESTSAMU
Destinataire : TEST TEST

Objet : Evacuation victime (38GVE) vers CENTRE HOSPITALIER MOULINS YZEURE

Vu





L

Création d'un bilan de surveillance



- Appuyer sur le pictogramme situé dans le bandeau bas.



Une page de surveillance apparaît avec un renvoi de cet onglet comprenant l'heure de création à gauche des onglets du bilan.

L'appui sur ce pictogramme sera à reproduire autant de fois que nécessaire pour le suivi de la victime.

M

Transmission de la synthèse par le jeton



Après régulation médicale et validation de la destination vers une structure médicale non référencée (cabinet médical, maison de santé, CH départements limitrophes, ...), le bilan peut être mis à disposition temporairement sous forme de « jeton ».

- Appuyer sur le pictogramme situé dans le bandeau bas.



Récupération SAU

Voici le jeton de connexion d'accès direct à la fiche URG SAP SAU

URL : <https://urgsaptest.sdis03.fr/ch>
Utilisateur : EP9JR
Mot de passe : DDXJ6



Deux possibilités de connexion :

- A partir d'une adresse internet ;
- A partir d'un QR code.

Adresse et identifiants de connexion.

OU

QR code à scanner.

Ces accès temporaires permettent de visualiser la synthèse pendant une durée de 30 min.



N Certificat de refus de prise en charge et de transport

- Renseigner le devenir de la victime avec les précisions (refus de soins ou refus de transport) et la langue parlée.

L'onglet correspondant au certificat apparaît en dessous de celui des paramètres vitaux.



- Saisir l'ensemble des champs demandés.

O Clôture de l'intervention

- Avant la clôture, s'assurer que l'ensemble des champs et onglets soient correctement renseignés.

Une fois vérifié, vous pouvez clôturer le bilan en appuyant sur le pictogramme :





Risques et contraintes

- La page des interventions en cours peut être discordante ou absente. Toutefois, la création d'une fiche victime reste possible.
- La transmission de la synthèse du bilan est nécessaire sous couverture du réseau mobile.



Critères d'efficacité

Le SAMU doit confirmer la réception du bilan lors du contact verbal.



Points clés

- Tous les champs visibles doivent être renseignés afin de garantir à la régulation du CRRA la recherche de l'ensemble des éléments du bilan.
- Les destinations et le transport doivent systématiquement être renseignés.
- La destination doit également être renseigné par la régulation du CRRA 15 lors du contact verbal afin que les structures destinataires puissent accéder à la synthèse en temps réel. La garantie de cette action passe par la fenêtre pop-up.



Annexe

Pictogramme	Correspondance
	Base documentaire.
	Synchronisation de l'application pour mise à jour des bases.
	Création d'une fiche intervention avec affichage automatique des interventions en cours.
	Transfert de fiche victime (Envoi ou reception).
	Deconnexion.
	Fiche intervention en cours.
	Pages des interventions en cours.
	Recherche d'un champ ou d'un PDF.
	Création d'une fiche victime.
	Retour page précédente.
	Incrémentation automatique du champ "date et heure" à proximité immédiate.
	Suppression total des données dans le champ à proximité immédiate.
	Incrémentation automatique du champ "heure" à proximité immédiate.
	Fiche victime n° X (victime n°1 dans l'exemple).
	Permet la transmission des données* de la victime de la tablette vers le Touch 7. (*Nom, prénom, date de naissance, âge).
	Onglet "Bilan circonstanciel". Incrémentation du type d'intervention.
	Onglet "Hémorragie". Incrémentation des signes et gestes associés.
	Onglet "Voies aériennes". Incrémentation des signes et gestes associés.
	Onglet "Respiration". Incrémentation des signes et gestes associés.



Pictogramme	Correspondance
	Onglet "Circulation". Incrémentation des signes et gestes associés.
	Extraction des données* de défibrillation du Touch 7 vers la tablette. Accessible dans l'onglet "circulation". (*Nombre de chocs, Evenements DSA).
	Onglet "Conscience". Incrémentation des signes et gestes associés.
	Onglet "Hypothermie". Incrémentation des signes et gestes associés.
	Onglet "Examen lésionnel". Incrémentation des signes et gestes associés.
	Onglet "Paramètres vitaux".
	Extraction des paramètres vitaux* du Touch 7 vers la tablette. (*PSNI, Pouls, SpO2)
	Onglet "MHTA" / "SAMPLE".
	Onglet "Examen paramédical". Spécificité du bilan Infirmier. Incrémentation de l'examen clinique, du conditionnement et des médicaments.
	Extraction de l'ECG du Touch 7 vers la tablette. Spécificité du bilan Infirmier
	Onglet "Renfort". Incrémentation des renforts intervenants sur cette victime.
	Onglet "Surveillance". Horodatage automatique. Incrémentation des paramètres vitaux
	Permet la répétition du champ à saisir
	Permet la prise de photographie (zone d'intervention, lésion, ordonnances)
	Onglet "Devenir".
	Onglet "Certificat de refus de prise de en charge ou de transport". Apparaît lors de la saisie des champs correspondant de l'onglet "Devenir". Traduit en anglais.
	Transmission numérique du bilan au CRRA 15. Transmission possible autant de fois que nécessaire.
	Visualisation de la synthèse du bilan. Visualisaiton possible autant de fois que nécessaire.
	Clôture du bilan. Action à réaliser lorsque la prise en charge de l'ensemble des victimes en lien avec la fiche intervention est terminée. Une fois clôturer, les bilans sont archivés et ne sont plus accessibles.